


Sistema de Âncora **ASSEFIX**

Registro ANVISA 81306310016

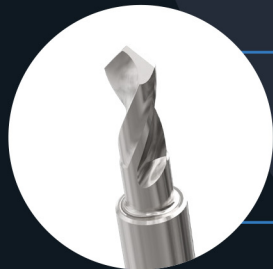

Exclusivo Dispositivo Modelador

Registro ANVISA 81306319007

O **Sistema de Âncora ASSEFIX** é uma solução completa, cuja tecnologia oferece maior biocompatibilidade, bioestabilidade, e controle pós-operatório. Prático para o cirurgião e ainda mais seguro para o paciente!



Peek com bário
Material radiopaco. Permite controle pós-operatório.

Fios FiberWire®
Resistência, segurança e confiabilidade.

Pronta para uso
Estéril e montada com agulhas.

Introdução total
Âncora totalmente sepultada intraóssea.

Âncora com Ø 1,7 mm x 4,5 mm
Dimensões ideais para regiões sensíveis.



Âncora fabricada em peek com 20% de bário

Oferece mais segurança e confiabilidade nos resultados a curto e longo prazo, além de permitir a realização da ressonância magnética sem qualquer interferência ou limitação no pós-operatório.



Fios FiberWire®

Fios resistentes e confiáveis para suturas mais eficientes, extinguindo o risco de rompimento da sutura durante a realização do nó.



Exclusivo Dispositivo Modelador com Ø 1,6 mm x 5,8 mm

Preparação com diâmetro (0,1 mm menor) e profundidade adequados para uma melhor introdução e fixação da âncora. Evita o risco de complicações por mau posicionamento da âncora ou lesões por impacto e rotação durante a colocação do implante.



Pronto para uso

Sistema totalmente pronto para uso com a âncora – fios e agulhas já montados no cabo introdutor, estéril e descartável. Além disso, disponibiliza botão para liberação suave, sem qualquer tipo de força ou impacto no implante. A haste curta facilita o posicionamento da âncora com incisões reduzidas.